

Conheça nossa história e todas as tecnologias disponibilizadas pela Nipponflex acessando pelo QR CODE



Nipponflex[®]
Preservando a Vida

Nipponflex[®]
Preservando a Vida

PRODUTO ORIGINAL



Canais de relacionamento

Avenida das Indústrias, 200 - Jardim América – Maringá (PR)
CEP: 87045-360

Email: relacionamento@nipponflex.com.br
www.nipponflex.com - 0800 200 8008



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Importante

Antes de utilizar esse equipamento, observe e siga todas as instruções de uso contidas neste manual, para que possa usufruir de todas as vantagens e promover uma vida longa ao seu produto. Você também pode acessar nosso site, onde explica todas informações sobre como utilizar seu vibromassageador através do aplicativo, acesse www.nipponflex.com

AVISO IMPORTANTE SOBRE O VIBROMASSAGEADOR

O vibromassageador instalado dentro do seu aparelho é um equipamento eletrônico de alta rotação com movimentos repetitivos que tem o objetivo de produzir vibração, porém para vibrar ele produz som. Quanto maior a intensidade e velocidade de vibração mais alto é o som. Este som é uma característica do equipamento e NÃO um defeito.



Advertências

Imãs, vibromassageadores (motores contendo imãs) e Biopower, devido ao campo magnético, **são proibidos para portadores de:**

- Marca-passo;
- Neuroestimuladores;
- Desfibriladores;
- Bombas de insulina; Implantes cocleares ou outros tipos que faça uso de baterias, pois o campo magnético pode causar interferência no funcionamento desses implantes;
- Ou quaisquer condições adicionais que proibam o uso de produto que emitem campo magnético.

Os produtos que produzem vibromassagem não são recomendados para: gestantes, recém-nascidos, indivíduos com osteoporose em estado avançado, trombose, coágulos de sangue, condições de hemorragia interna ou externa, durante o período de recuperação cirúrgica (ou qualquer outra condição específica).

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenha recebido instruções à utilização do aparelho ou estejam sob supervisão de uma pessoa responsável pela segurança.

Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

Características Elétricas

Entrada: 127V-220V 60Hz

Saída: 12V 2A

Potência nominal: 24 watts

Tensão: 127-220V

Composição do equipamento

O kit vibromassageador é composto com opcional de 01 controle ou 02 controles, conforme sua compra, sendo:

Kit para colchão	Solteiro		Casal (opcional)	
	1 controle	1 controle	2 controles	2 controles
Motores instalados no interior do colchão	5	10	10	10
Controle	5	1	2	2
Fonte	1	1	2	2
Plug de conexão da fonte (fixo ao lado da cabeceira do colchão)	1	1	2	2
Plug de conexão do controle (fixo ao lado da cabeceira do colchão)	1	1	2	2
Suporte para controle	2	2	4	4

Limpeza

- Ao realizar a limpeza do aparelho, retirar cabos da tomada;
- Para limpeza do controle, usar apenas um pano ligeiramente úmido;
- Nunca utilizar produtos de limpeza ou abrasivos.

Sobre

Saiba mais sobre o funcionamento e os benefícios do seu Aparelho Reparador de Sono.

Sobre

Nipponflex Preservando a Vida

RELAX S Y S T E M

Nipponflex Relax System

O app Relax System da Nipponflex é exclusivo para os usuários do Aparelho Reparador de Sonos. Ele oferece controle completo do seu sistema de dormir, com ativação de massagem, modo, parte do corpo e muito mais! Tudo digital, rápido e ao alcance de suas mãos. Sem fio e sempre com você.

No Relax System da Nipponflex você pode:

- Ligue/desligue o sistema de massagem do Triple S FIR
- Selecione 9 tipos diferentes de massagem
- Escolher áreas do corpo para massagem
- Controlar intensidade da massagem
- Controlar velocidade da massagem
- Defina o despertador silencioso, usando o sistema de massagem para ligar no horário definido pelo alarme.

Você ama a Nipponflex?

Curta no Facebook: www.facebook.com/Nipponflex
Siga-nos no Instagram: [@nipponflexoficial](https://www.instagram.com/nipponflexoficial)

Nipponflex
Preservando a Vida

RELAX
S Y S T E M
MASSAGEM ELETRÔNICA

Vibromassageador

Tenha um sono reparador

Agora você já conhece todas as possibilidades do seu Nipponflex Relax System. Está preparado para a experiência mais relaxante da sua vida?

Aproveite! Você pode dormir sem se preocupar em encerrar a massagem, é só programar o tempo no aplicativo.

Comece a usar

Depois de ajustar todas as funcionalidades, aperte o botão «iniciar». Relaxe e aproveite a sua massagem!

Conectado Nipponflex-ANDRO...

INICIAR **ALARME**

Programa: Auto

Tempo: 15:00

Zonas de massagem

Pescoço Ombros Costas Quadril Pernas

Intensidade

Velocidade

Nipponflex Preservando a Vida

RELAX S Y S T E M


Alarme

No botão **alarme** você pode agendar sua massagem. É só escolher o melhor horário e clicar em **concluído**.




Programa

Nesta opção você pode escolher os tipos de massagens relaxantes ou deixar no modo automático.

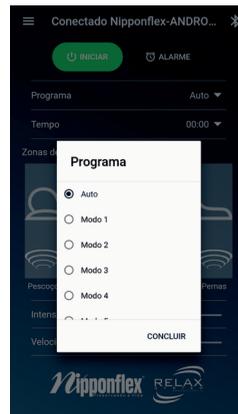

Tempo

O tempo da massagem pode variar de 5 a 15 minutos.

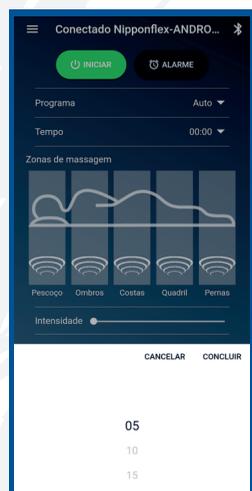

Zonas de Massagem

Está sentindo dores no pescoço? E nas costas?

No Relax System você escolhe qual parte do corpo quer massagear!



Intensidade e Velocidade

Um dia cansativo pede uma massagem mais rápida e intensa. Para uma noite tranquila, movimentos mais lentos e suaves ajudam a pegar no sono. Altere a intensidade e a velocidade conforme sua necessidade.




Mais informações para você

O menu do aplicativo fica na parte superior esquerda da tela. Nele você encontra informações sobre a conexão e o produto.

Controle

A opção «**controle**» mostra a tela principal, com as funções de massagem.

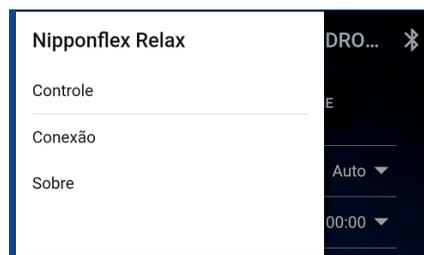

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Antes de ligar o equipamento, certifique-se de que todos os cabos estejam corretamente conectados;
- Antes de desconectar algum dos cabos, desligue a fonte da tomada para não danificar o equipamento eletrônico;
- Nunca opere seu vibromassageador por mais de 45 minutos seguidos;
- Quando terminar o tempo, reiniciar somente 30 minutos após a última massagem;
- Pode haver aquecimento do controle até 40°C quando o aparelho encontra-se em modo de espera. Isto é uma característica normal do equipamento e não um defeito;
- É proibido o uso deste equipamento em lugares úmidos e molhados. Exemplo, banheiro, sauna, piscinas etc;
- Não guarde o controle e fonte em locais onde haja a presença de calor excessivo ou inflamáveis;
- Não bata ou arremesse o controle do seu aparelho;
- Esse equipamento, o controle e a fonte, não podem entrar em contato com água e caso isso ocorra, tire-o primeiramente da tomada. O aparelho não deve ser ligado e deve ser inspecionado pela assistência técnica autorizada, conforme termo de garantia;
- Para evitar acidentes, não inserir quaisquer objetos estranhos à função própria do produto, principalmente quando estiver em funcionamento;
- Evite colocar sobre o aparelho equipamento eletro-eletrônico, cartões magnéticos, relógios, etc;
- Este produto foi projetado para uso doméstico;
- Para evitar queima da fonte decorrente da oscilação de energia é recomendado a utilização de estabilizador de energia (bivolt) certificado pelo Inmetro. A tensão de entrada da fonte é de 127V a 220V em corrente alternada com frequência de 50 ou 60Hz;
- Caso o seu cabo de energia possua três pinos redondos (sendo um deles o pino de aterramento, o fio terra), não recomendamos remover o terceiro pino.
- Verifique se as instalações elétricas da residência estão de acordo com as normas técnicas vigentes;
- Em dias chuvosos recomenda-se desligar aparelho da tomada até que o tempo volte a estabilizar;
- Em caso de viagem ou ausência temporária ao lar, recomenda-se retirar o equipamento da rede elétrica
- Ao desconectar algum dos cabos, desligue a fonte da tomada para não danificar o equipamento eletrônico; Nenhum dano causado por mau uso será de responsabilidade do fabricante, recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.


INSTRUÇÕES DO EQUIPAMENTO

Ao desembalar o produto, você terá em mãos o kit vibromassageador, constando o controle, fonte, suportes do controle. Seguindo a sequência de instalação:

- 1) Encaixe o plug do controle no plug que sai do colchão (figura 01);
- 2) Encaixe o plug da fonte de alimentação de energia no plug que sai do colchão (figura 02);
- 3) Encaixe o plug do cabo de alimentação na fonte de alimentação de energia (figura 03);
- 4) Conecte o cabo de alimentação de energia na tomada elétrica (figura 4);
- 5) A fonte de alimentação do produto deve ser posicionada à pelo menos 30cm de distância de qualquer material inflamável, como colchões, cobertas, colchas, lençóis, carpetes etc.

Observação: Se o seu produto possuir 2 controles remotos, haverá duas fontes de alimentação de energia.

Nesse caso, sugere-se utilizar um filtro de linha (certificado pelo Inmetro) conectado na tomada elétrica e as fontes de alimentação de energia conectadas no filtro de linha. Após a instalação, o produto está pronto para ser utilizado. Ao desligar o equipamento, certifique-se que foi retirado da tomada.

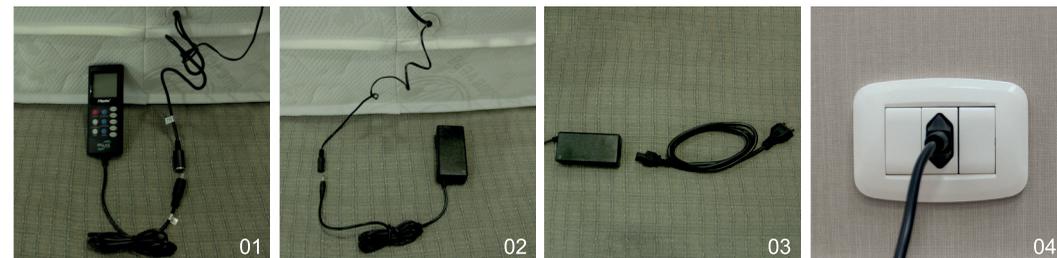

1º Ligar/Desligar

Pressione uma vez para ligar ou desligar o controle.

2º Vibro automático – Função ativa e desativa vibro automático:

Pressione essa tecla uma vez e o sistema fará todas as funções de massagem automaticamente. Ao ativá-la, aparecerá no canto superior direito do display a palavra “AUTO” indicando que essa função está ativada. Para desativar, pressione a tecla novamente. *Obs: Na tela do canto superior direito indica se está ativado a massagem automática “AUTO” ou “manual”.*

3º Modo - Função seleciona tipos de mensagens diferentes:

Essa função disponibiliza 9 combinações diferentes de mensagens, e cada vez que esse botão é pressionado muda-se o “modo” de 1 até 9, quando o tempo do modo selecionado acabar o sistema será desligado automaticamente. Aparecerá no canto inferior esquerdo do display o número da mensagem selecionada, sendo:

Modo 1: Realiza massagem “contínua”, de alta intensidade que aciona todos os motores sem interrupção.

Modo 2: Realiza massagem “pulsante” de todos os motores sem interrupção.

Modo 3: Inicia-se uma massagem de média intensidade em todas as zonas do corpo, na sequência a intensidade vai diminuindo e aumentando, criando um ciclo repetitivo desse processo.

Modo 4: Massagem de alta intensidade que se inicia pela região do pescoço e passa sucessivamente pela demais regiões do corpo.

Modo 5: Massagem de alta intensidade em duas zonas simultâneas, iniciando pela região do pescoço e ombros e passando sucessivamente pelas demais regiões do corpo.

Modo 6: Massagem de média intensidade em uma zona por vez, iniciando pela região do pescoço. Ao terminar a massagem da próxima zona, são acionados os motores da zona inferior. Esse ciclo é sucessivamente repetido por todas as zonas.

Modo 7: Massagem em pulso de alta intensidade, na qual todas as zonas são estimuladas três vezes, com diminuição gradativa da intensidade e repete o ciclo novamente.

Modo 8: Massagem que começa em baixa intensidade e vai aumentando gradativamente até a intensidade máxima. Enquanto há diminuição da intensidade nessa zona, inicia-se a massagem da próxima região. O ciclo inicia-se pelo pescoço e passa por todas as zonas.


Modo 9: O ciclo começa com uma massagem em baixa intensidade pela região do pescoço que vai aumentando gradativamente até a intensidade máxima. Então a intensidade é diminuída e simultaneamente inicia-se a massagem na região do ombro, em baixa intensidade indo até a alta. A intensidade é diminuída nesta zona e, simultaneamente, inicia um novo ciclo na região do pescoço e das costas. Essa combinação se repete sucessivamente por todas as zonas.

4º Intensidade: Pressione e selecione o tipo de intensidade que desejar sendo, baixa, média e alta. Será indicado no display do lado esquerdo se a intensidade da massagem está alta ou baixa.

5º Velocidade: Pressione e selecione o tipo de velocidade que desejar sendo, baixa, média e alta. Será indicado no display do lado direito se a velocidade da massagem está alta ou baixa.

6º Tempo: Pressione e selecione o tempo da massagem desejada (5, 10, 15 minutos). No display no canto inferior direito indica o tempo que foi selecionado.

7º Zonas: Opção de 5 zonas do corpo a serem massageadas sendo, (Pescoço/Ombros/Costas/Quadril/Pernas), pressione o botão da região correspondente para ativar ou desativar, será indicado no display na parte superior.

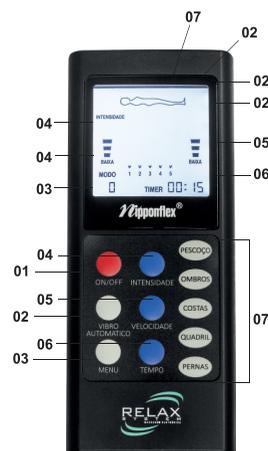

GUIA RÁPIDO APLICATIVO Nipponflex Relax System

É muito fácil instalar!

Em apenas cinco passos você tem o controle do seu Relax System na palma da mão, sem nenhum esforço.

1 Acesse a loja de aplicativos do seu celular:




2 Procure por **Nipponflex Relax System** e baixe o aplicativo:



3 Quando a instalação estiver concluída, abra o aplicativo para começar a utilizá-lo.

4 Ative o Bluetooth (localizado no painel de configurações do seu celular) para conectar-se ao aplicativo.

5 Com o Bluetooth ativado, uma lista de dispositivos disponíveis aparece na tela. Conecte-se ao dispositivo **Nipponflex**.

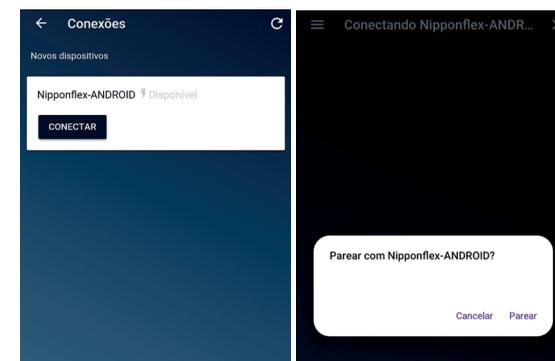

Configure do seu jeito!

Conheça as comodidades do seu **Nipponflex Relax System** disponíveis na tela inicial.

Conexão

Clicando em “conexão”, você pode conectar ou desconectar seu controle Relax System ao aplicativo bluetooth ao lado do botão “conectar/desconectar”, no ícone ≡ é possível nomear ou renomear seu dispositivo.

Ao conectar seu aplicativo aparecerá a mensagem de **Atenção**, informando que a utilização simultânea do controle e do App, pode ocasionar erros de funcionamento.

